



TRATAMIENTO PARA EL OJO SECO

thermaeye



TECNOLOGÍA DE LUZ PULSADA INTENSA (IPL)

**DESARROLLADA POR
Y PARA LA OFTALMOLOGÍA.**

- Equipo para el tratamiento del ojo seco.
- Tratamiento indoloro, sin efectos secundarios.
- Se realiza en consulta, sin necesidad de quirófano.
- Cada tratamiento no dura mas de 5 minutos.
- 3 tratamientos iniciales.
- Fácil mantenimiento.

TRATAMIENTO PARA EL OJO SECO

thermaeye



ES LA ÚLTIMA NOVEDAD EN TECNOLOGÍA DE LUZ PULSADA.

ESTE SISTEMA HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO EN ITALIA SIGUIENDO CRITERIOS DE **FACILIDAD DE USO, PRACTICIDAD Y EFICACIA.**


> Se trata de un instrumento muy **compacto** y **ligero**, que puede transportarse sin dificultad de un lugar a otro. Los **filtros** del cabezal son **intercambiables** y permiten seleccionar rápidamente el tipo de aplicación según las necesidades del paciente.

> La **amplia variedad de filtros**, hace que el dispositivo **Thermaeye** sea el más versátil para aplicaciones que van desde lesiones vasculares y pigmentarias, antiinflamatorios causantes de la **MGD** y antimicrobianos (Demodex).




> Pulso fraccionado: garantía de seguridad

El pulso del **Thermaeye** puede dividirse hasta en **tres pulsos**. Los pulsos fraccionados permiten utilizar fluencias más altas al tiempo que protegen la piel. La tecnología inteligente utilizada **protege la piel y previene el daño térmico**.

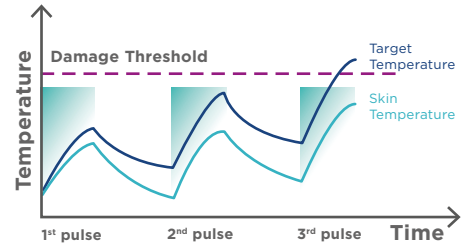

> Disminución del riesgo de daño térmico

El nuevo sistema de **enfriamiento** de la piel **por contacto** asegura **tratamientos indoloros** y **mínimamente invasivos**. Este sistema innovador permite al médico eliminar efectos secundarios tales como enrojecimiento o quemaduras. **Máximo confort** para el paciente, **máxima seguridad** para el médico.

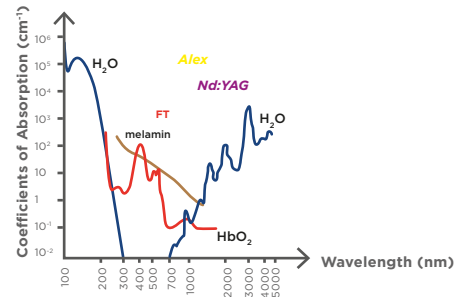

> Cabezal con filtros intercambiables

No es necesario cambiar el cabezal: con sólo reemplazar los filtros, en pocos segundos el médico selecciona la longitud de onda que mejor se adapta a la aplicación y patología del paciente.

> Diferentes longitudes de onda a disposición

(520, 650 y 800 nm) en combinación con la tecnología pulsada aseguran mayor absorción de luz por parte de la melanina permitiendo trabajar incluso en los fototipos más oscuros.



TIPO DE FILTRO	ROSÁCEA vascular & lesiones pigmentadas	MGD	DEMODOX arrugas
520 nm	HASTA FOTOTIPO III		
650 nm		HASTA FOTOTIPO VI	
SA 800 nm			HASTA FOTOTIPO IV

520 nm. Es el filtro perfecto para realizar los tratamientos de lesiones vasculares y pigmentación cutánea hasta pacientes con tipo de piel de grado III.

650 nm. La combinación adecuada convierte este filtro en el idóneo para tratar la MGD en todo tipo de piel, hasta fototipo grado VI.

800 nm. Gracias a la emisión ultravioleta de este filtro, podemos disparar directamente en párpado para tratar el Demodex de una forma mas eficaz. Además gracias a este filtro estimulamos la producción de nuevo colágeno, mejorando el tono, la textura y luminosidad de la piel, otorgando a esta un efecto lifting sin necesidad de tratamientos mas invasivos.



> **Thermaeye** es el único equipo del mercado que dispone de una herramienta de control sumamente útil en la práctica diaria. Se trata del **medidor de energía incorporado**, que controla constantemente el número de pulsos emitidos, la eficacia real de cada pulso y el funcionamiento correcto del cabezal.

> Gracias a esta herramienta, **Implantec** garantiza la cantidad y calidad de los pulsos durante toda la vida útil del equipo.

TRATAMIENTO PARA EL OJO SECO

thermaeye

¿POR QUÉ ESTOS TRATAMIENTOS SON IMPRESCINDIBLES A CORTO Y MEDIO PLAZO EN CLÍNICAS Y CONSULTORIOS?

Porque resultan necesarios para:

- Pacientes con MGD.
- Pre y post cirugía refractiva.
- Pacientes con Glaucoma.
- Tratamientos realizables en la consulta, sin necesidad de quirófano.
- Alta rentabilidad del equipo. La vida útil de la pieza de mano es de 25.000 disparos.
- Alta satisfacción de los pacientes, lo que facilita la fidelización de los mismos.
- **Implantec** brinda soporte gráfico para las salas de espera, con información destinada al paciente.
- Alto impacto tecnológico.



+5411 43 02 71 11

Perdriel 1624 • C1279AHN • CABA • Argentina

info@implantecinsumos.com
implantecinsumos.com

FABRICADO EN ITALIA
Equipo "Thermaeye Plus" en Europa